

# exigo

Analyseur d'Hématologie Vétérinaire

*Des résultats...  
... en 1 minute !*



## **EXIGO EOS ANALYSEUR D'HÉMATOLOGIE**

Spécialement conçu pour le domaine vétérinaire. Système robuste et adaptable avec des caractéristiques uniques comme le système micro capillaire (MPA) ou modalités préventives de bouchage.

Modèle permettant le comptage de 4 populations leucocytaires : LYM, MONO, NEUT, EOS.

Comprenant un RÉACTIF SUPPLÉMENTAIRE qui mesure spécifiquement les ÉOSINOPHILES.

- Ecran couleur
- 19 paramètres
- Nettoyage automatique
- Système micro capillaire
- Agitateur intégré
- Lecture des codes barres
- Résultats de 1 à 3 minutes
- 4 réactifs

## **FACILITÉ D'UTILISATION**

EXIGO est intuitif, simple d'utilisation avec écran tactile. Les explications sont claires et explicites.

Le « Quick View », permet en un coup d'œil de visualiser la normalité de vos résultats ou d'utiliser les présentations traditionnelles avec graphiques.


## **LE « I-BUTTON »**

EXIGO donne la marche à suivre grâce à des recommandations claires et des messages informatifs utiles.

## **ADVANCE DIFF**

Le comptage différentiel des leucocytes chez l'animal est une des mesures les plus difficiles à réaliser.

Notre solution est un logiciel adapté avec différents profils selon les espèces. Chaque profil utilise une approche dynamique de l'analyse de l'échantillon pour un résultat approprié, le plus précis possible.

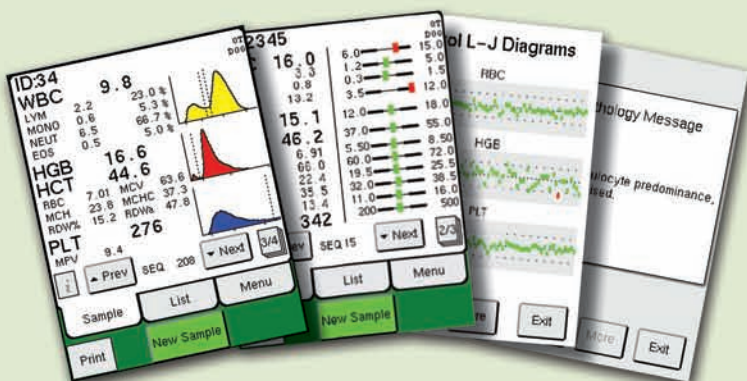

## **12 PROFILS D'ESPÈCES DIFFÉRENTES**

12 profils pré installés.

Possibilité de changer les paramètres facilement.



### CONCEPT QUALITÉ TOTALE

Le protocole de qualité totale est assuré à toutes les étapes de fabrication et de préparation pour des résultats fiables et reproductibles.



### SPÉCIFICITÉ UNIQUE « MPA »

Les petites quantités de volume sanguin ne sont plus un obstacle.

Avec le système micro capillaire MPA vous obtiendrez un résultat fiable à partir d'une simple goutte de sang.



### AGITATEUR INTÉGRÉ

Qualité des résultats optimisée.  
Capacité de 6 tubes de différentes tailles.



### RÉACTIFS

Consommables pour l'EXIGO EOS :

- EXIGO Diluent 10 L
- EXIGO Lyse 1,9 L
- EXIGO REAGENT 1,9 L
- EXIGO System Cleaner 1,9 L (nettoyant)

Réactifs vendus séparément pour une gestion plus économique.

Pack de rangement optimisé des réactifs positionné sur le côté droit de l'analyseur.



### DIMENSIONS

Analyseur EXIGO EOS (seul) : 30 x 47 x 40 H cm  
Rack à réactifs (seul) : 17 x 37 cm  
Poids : 17 kg

### PRÉVENTION DE BOUCHAGE

Le rinçage automatique de l'aiguille d'aspiration et l'utilisation d'un nettoyant enzymatique réduisent significativement les risques de bouchage.



# exigo