

# Présentation, lecture et archivage des images


## Négatoscope pour mammographie

8 clichés 18 x 24 ou 3 clichés 36 x 43



### DONNÉES TECHNIQUES

- 4 rideaux réglables
- Luminance maxi : 6500 Cd / m<sup>2</sup>
- Affichage 8 films 18 x 24
- Affichage 3 films 36 x 43
- 1 plage 106 x 43 cm
- Dimensions hors tout : 1380 x 700 x 105 mm
- Poids : 45 kg
- Variateur 10% - 100% haute fréquence
- Tubes daylight 6500°K
- Conforme Din 6856
- Alimentation 220 V - 50 Hz
- CE - CEM

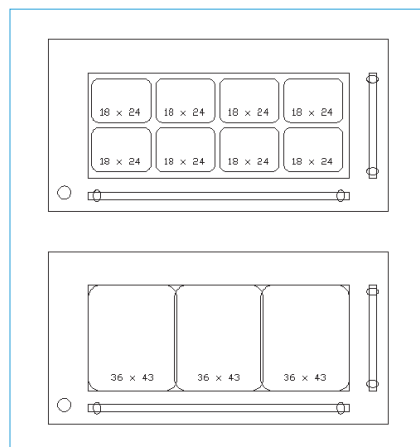

### NÉGATOSCOPE À DIAPHRAGME

Dans le cadre de la campagne du dépistage du cancer du sein, le mammoscope est un élément primordial dans la chaîne d'imagerie.

Afin de répondre au cahier des charges relatif aux dispositifs pour l'interprétation des clichés, la société DMV propose son nouveau modèle de mammoscope.

Excellent compromis pour son rapport qualité-prix, le mammoscope 8/3 clichés est l'outil requis pour tout cabinet en cours d'accréditation ou souhaitant s'équiper d'un nouveau modèle.

Sur le plan technique, le mammoscope, équipé de 4 diaphragmes à réglages indépendants répond parfaitement à la norme DIN 6856.

La grande nouveauté de cet appareil réside dans le système d'entraînement des rideaux réalisé sans chaînettes ni courroies. Il vous assure ainsi une excellente fiabilité dans le temps et une grande souplesse de réglage.

Ainsi il offre :

- Un haut niveau de luminance > 6000 Cd/m<sup>2</sup>
- Une parfaite homogénéité de la lumière (conformité DIN 6856)
- Aucun éblouissement grâce au système d'occultation à 4 rideaux amovibles sur toute la façade permettant de délimiter avec précision la surface à interpréter
- Il permet l'affichage de 8 clichés 18 x 24 cm ou de 3 clichés 24 x 30 cm

| Référence | Désignation                        |
|-----------|------------------------------------|
| NM08UV    | Négatoscope mammo 8/3 clichés      |
| YP105015  | Tube daylight 36 W de remplacement |

## Négatoscope mammo 12 clichés 18x24




| Référence | Désignation   |
|-----------|---|
| NM12UV    | Négatoscope mammo 12 clichés standard   |
| NM12UM    | Négatoscope mammo 12 clichés barre mobile permet l'affichage de 3 films 36 x 43 |
| YP105015  | Tube daylight 36 W de remplacement  |
| NM12LO    | Loupe sur axe pour négatoscope 12 clichés                                       |
| NM12CHA   | Chariot mobile pour néga. mammo 12 plages                                       |
| NMLOU     | Loupe sur axe X-Y   |

## Loupes pour interprétation



Masque loupe occultant LP4

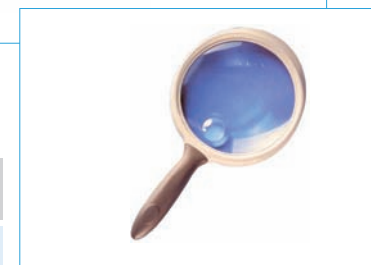

Loupe à main LP6

| Référence | Désignation  |
|-----------|--|
| LP1       | Loupe ø 120 mm montée sur flexible chromé avec socle aimanté, optique en verre G = 2 |
| LP2       | Loupe ø 100 mm modèle à main, optique en verre G = 2,5 aplanétique                   |
| LP3       | Loupe ø 120 mm modèle à main, optique en verre G = 2                                 |
| LP4       | Loupe masque occultant pour mammographie G = 2                                       |
| LP5       | Loupe ø 127 mm modèle à main, optique en verre G = 2                                 |
| LP6       | Loupe ø 127 mm modèle à main, optique acrylique G = 2 avec lentille intégrée G = 4   |
| LP8       | Loupe compte fils repliable en acier G = 8   |

Série de loupes en version à main ou sur supports destinées à l'aide à l'interprétation. D'excellente qualité, toutes nos loupes sont reconnues pour un usage médical.