



* L'innovation source de valeur.

Le lecteur numérique compact ultra rapide

FCR PRIMA T2



73
IPs/hr




► Un design ultra compact

Sa taille, son poids et son chargement frontal rendent le lecteur Prima T2 utilisable tout simplement sur une table ou dans le coffre d'une voiture.

► Une compatibilité optimale

Le lecteur FCR Prima T2 est utilisable avec tous les formats de cassettes Fujifilm existants.

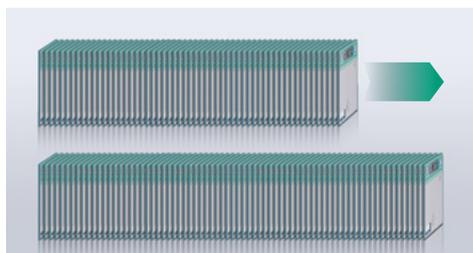

► Une cadence de lecture jusqu'à 73 IP/heure

Une visualisation de l'image en moins de 30 secondes et un effacement de l'IP en 45 secondes, vous permettent d'enchaîner les clichés très rapidement avec un temps d'immobilisation de l'animal réduit.

Caractéristiques techniques



Formats disponibles (cm)	18 x 24 / 24 x 30 / 36 x 43
Cassettes associées	Cassette IP type CC
Capacité d'acquisition	24 x 30 cm : 40 - 65 IP/heure / 36 x 43 cm : 35 - 55 IP/heure
Spécification de lecture	100 µm/pixel
Connexion	10 Base T / 100 Base TX
Dimensions (L x P x H)	560 x 540 x 392 mm
Poids	39 kg
Alimentation	220-240 V monophasé 50 - 60 Hz
Conditions externes d'utilisation	Température 10 - 30°C / Humidité 15 - 80%
Consoles utilisables	Prima V - Advance

FUJIFILM
Value from Innovation™

FUJIFILM Medical Systems France

Immeuble Objectif II, 2 rue Louis Armand, 92600 Asnières, France
Tél.: +33 (0)1 47 15 55 15 - Fax: +33 (0)1 47 31 62 00 - www.fujifilm.eu/fr